



Tekniske data:

■ **Setebredde:**

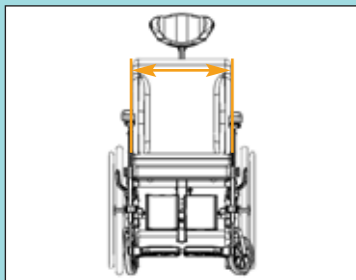


35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm.

■ **Totalbredde på rullestolen:**

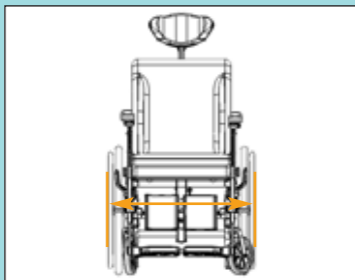

Rullestolens sittebredde + 18 cm.

■ **Setedybde:**

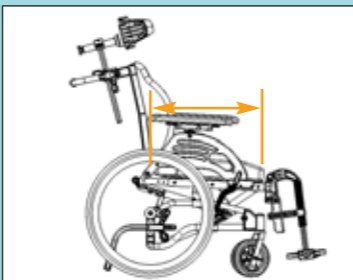


42,5 cm, 45 cm, 47,5 cm, 50 cm.

■ **Setehøyde:**



46,5 cm og 50 cm med 24" hjul.
46,5 cm med 12" og 16" hjul.

■ **Setetilt:**

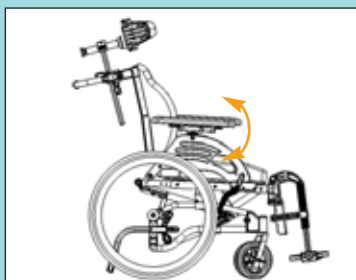


-5° til +20°.

■ **Ryggvinkel:**



90° til 135°.

■ **Rygg høyde:**

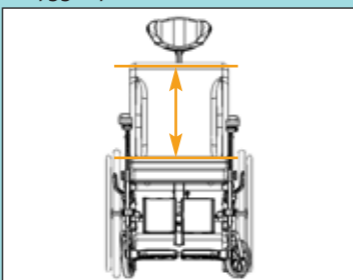

48 cm som standard.
(60 cm med ryggforlenger)

■ **Vekt:**



Stolens vekt: ca 29 kg.
Maks brukervekt: 125 kg.



ÅRETS NYHET!

Netti 4U

Netti 4U comfort|CED

ALU REHAB™
Thinking ahead - moving forward

FOR BROSJYRE/MER INFORMASJON, KONTAKT OSS:

ALU REHAB AS
Fabrikkveien 22 Kvål, 4323 Sandnes
Tel. +47 51 68 18 88, Fax +47 51 68 18 89
E-post: post@alurehab.com
www.alurehab.com www.alurehab.no

ALU REHAB™
Thinking ahead - moving forward

Tilbehør:

Mye av Netti tilbehøret kan benyttes, se hovedkatalogen for detaljer.



■ Hodestøtte liten og hodestøtte stor kan også benyttes.



■ Vital Base sitte-system (rygg- og sitteputer) med Climatherm™ trekk kan integreres i stolen. Sitteputen er her vist med inkontinestrek Techmaflex.



■ Hoftebelte. Kan fåes i ulike varianter.

Detaljer på Netti 4U komfort|CED:



■ Oppfelbart armlene gir rom for enklere sideveisforflytninger.



■ Høyde- og vinkelregulerbar kjørebøyle for bedre grep.



■ Lav vekt og sammenleggbar ramme gjør den enkel å transportere.



Netti 4U komfort|CED (Comfort/Easy to use/Design)

Den nye Netti 4U komfort|CED stolen gjør hverdagen enklere – både for bruker og medhjelper.

Netti 4U komfort|CED er en multifunksjonell komfortrullestol med gode ergonomiske løsninger, smal totalbredde og lav totalvekt. Enkle og funksjonelle grep og justeringsmuligheter gjør denne stolen svært brukervennlig.

Netti 4U komfort|CED:

- Trinnløs ryggregulering, tilt, og vinkelregulerbare benstøtter gir mulighet for variasjon og øker trykkfordelingen i stolen.
- Oppbygning av sittepute i kombinasjon med velcorygg og ryggpute Smart med innebygd korsrygg- og sidestøtter, tilpasses individuelt og gir unik stabilitet, støtte og komfort.
- Lav vekt og sammenleggbar ramme gjør den enkel å transportere.

- Enkle og funksjonelle grep for medhjelper. Høyde- og vinkelregulerbar kjørebøyle med ergonomisk utforming. Oppfellbart armlene gir rom og mulighet for enklere og bedre løft og sideveisforflytninger.
- Med sin smale totalbredde og gode manøvreringsegenskaper, er rullestolen svært godt egnet når det er begrenset plass.
- Justerbar setehøyde: 46,5 cm og 50 cm.
- Justerbar setedybde fra 42,5 – 50cm.



Netti 4U komfort|CED er testet og godkjent av TUV Product Service i Tyskland ihht. europeisk standard EN 12183:1999